

ECCELLENTI PERFORMANCE DI PULIZIA PER IL RIPROCESSAMENTO DEI VOSTRI STRUMENTI

Aniosyme DLM Maxi

DETERGENTE TRI-ENZIMATICO LEGGERMENTE ALCALINO PER UN ECCELLENTE RIPROCESSAMENTO DEGLI STRUMENTI CHIRURGICI

Aniosyme DLM Maxi è il detergente liquido alcalino che offre la massima efficacia detergente nel riprocessamento degli strumenti chirurgici. Sviluppato per coniugare un'intensa detergenza e un'eccellente compatibilità con i materiali. Aniosyme DLM Maxi è privo di silicati e può essere utilizzato a concentrazioni minime.

- **FORTE** - Efficacia detergente intensa per tutti i tipi di materiali
- **ENZIMATICO** - Complesso tri-enzimatico: efficace su tutti i tipi di sporco
- **EFFICACE** - Prodotto alcalino altamente efficace. Efficace a partire da 5 minuti



Aniosyme DLM Maxi

Detergente tri-enzimatico leggermente alcalino per un eccellente riprocessamento degli strumenti chirurgici



Aniosyme DLM Maxi
5 L tanica
Codice d'ordine: AN1920038

FORTE

Efficacia detergente intensa per tutti i tipi di materiali (acciaio inossidabile, titanio, sintetico, polisolfoni, PVC/ABS, alluminio anodizzato, ecc.)

ENZIMATICO

Complesso tri-enzimatico: efficace su tutti i tipi di sporco per risultati di pulizia garantiti.

EFFICACE

Prodotto alcalino altamente efficace per il riprocessamento dei dispositivi medici.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- | | | |
|--|------|---------------------|
| • Densità | 20°C | 1,21 g / ml |
| • Valore pH* (concentrato) | 20°C | 10,3 |
| • Area pH* (soluzione, 1 - 5 ml/l) | 20°C | 10,1 - 10,6 |
| • Conduttività (soluzione, 1 - 5 ml/l in acqua DI) | 20°C | 0,09 - 0,38 mS / cm |

*Misurazioni del valore di pH in condizioni operative sempre per mezzo di pH metro con compensazione della temperatura.

INFORMAZIONI D'ORDINE

PRODOTTO	UNITA' DI CONFEZIONAMENTO	CODICE D'ORDINE
Aniosyme DLM Maxi	2 x 5 L tanica	AN1920038
Aniosyme DLM Maxi	1 x 10 L tanica	AN1920024
Aniosyme DLM Maxi	1 x 25 L tanica	AN1920018



CE LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuito da:
NUOVA FARMAC SRL
Via W. Flemming, 7
37026 Settimo di Pescantina
Verona
Italy

ECOLAB®

www.ecolab.com

LABORATOIRES
ANIOS
An Ecolab Company

www.anios.com

AREA DI APPLICAZIONE

Pulizia di apparecchiature chirurgiche e mediche, dispositivi medici in macchinari di lavaggio automatici e tunnel di lavaggio.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Soluzione concentrata solo per uso professionale
- Usare diluizioni tra lo 0,1 e lo 0,5% di acqua, preferibilmente da calda a tiepida a seconda dei tipi di apparecchiature
- Alla diluizione di impiego, il prodotto non mostra incompatibilità con i materiali che si trovano comunemente

INGREDIENTI

Tensioattivi non ionici e anionici, agenti sequestranti, complesso enzimatico, eccipienti.

STOCCAGGIO


Pericoloso- rispettare le precauzioni per l'utilizzo (Redatto secondo le norme europee vigenti in materia di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici). Conservazione: tra +5°C e +25°C.

CERTIFICAZIONI

Su richiesta saremo lieti di fornire i certificati.

USO SICURO DEL DISPOSITIVO MEDICO

Leggere l'etichetta e le informazioni di prodotto.

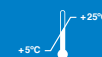

SOLO PER USO PROFESSIONALE