



## AGENTE DI RISCIACQUO PER LA STRUMENTAZIONE

### Anios RL

#### AGENTE DI RISCIACQUO PER LA STRUMENTAZIONE

- Attivatore di asciugatura per un'asciugatura veloce e senza lasciare tracce
- Elevata compatibilità con i polisulfoni
- Adatto per essere utilizzato in tutti i tipi di macchine



# Anios RL

Agente di risciacquo per la strumentazione



Anios RL  
5 L tanica



Anios RL  
10 L tanica

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Liquido limpido e privo di colore
- pH prodotto puro\* a 20°C: circa 7,2
- pH prodotto diluito allo 0,08%\*: circa 5,8
- pH prodotto diluito allo 0,3%\*: circa 6,2
- Densità a 20°C: 1,013

\* Misurazione del valore di pH in condizioni di utilizzo sempre mediante un pH metro con temperatura di compensazione.

## INFORMAZIONI D'ORDINE E CONFEZIONAMENTO

PRODOTTO	UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO	CODICE D'ORDINE
Anios RL	2 x 5 L tanica	AN0315038
Anios RL	1 x 10 L tanica	AN0315024

## AREA DI APPLICAZIONE

Agente di risciacquo neutro per strumenti chirurgici e medici. Prodotto combinato che fornisce un'asciugatura rapida senza lasciare tracce.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Soluzione concentrata. Utilizzare a diluizioni da 0,08% a 0,3% in acqua fredda o calda (cioè da 0,8 a 3 ml per litro d'acqua) a seconda del tipo di macchina.

## INGREDIENTI

Associazione di tensioattivi, agente antischiuma, agente stabilizzante, eccipienti.

## STOCCAGGIO


Pericoloso - rispettare le precauzioni per l'uso (stabilite secondo le regole Europee in vigore riguardo alla classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici). Conservazione: da +5°C a +25°C.

## CERTIFICATI

Su richiesta saremo lieti di fornirvi i certificati.

## USO SICURO DEL DISPOSITIVO MEDICO

Leggere le informazioni e l'etichetta del prodotto.

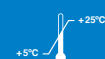

SOLO PER USO PROFESSIONALE



**CE** LABORATOIRES ANIOS  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

Distribuito da:  
**NUOVA FARMAC SRL**  
Via W. Flemming, 7  
37026 Settimo di Pescantina  
Verona  
Italy

**ECOLAB**

www.ecolab.com

LABORATOIRES  
**ANIOS**  
An Ecolab Company

www.anios.com