

SPERIMENTATE LA MIGLIORE COMBINAZIONE PER IL RIPROCESSAMENTO DEGLI STRUMENTI

Aniosyme Synergy WD

DETERGENTE TRI-ENZIMATICO PER UN SOFISTICATO RIPROCESSAMENTO AUTOMATICO DEGLI STRUMENTI

Aniosyme Synergy WD è il detergente liquido leggermente alcalino per il riprocessamento automatico sofisticato degli strumenti. Fornendo eccellenti prestazioni di pulizia, la sua formula tri-enzimatica specificatamente sviluppata, priva di silicati, offre un'eccellente compatibilità dei materiali alle concentrazioni più basse.

- **FORTE** - Dimostrato elevato potere detergente
- **ENZIMATICO** - Complesso tri-enzimatico: efficace contro tutti i tipi di sporco
- **EFFICACE** - Efficacia elevata con qualsiasi tipo di qualità dell'acqua



Aniosyme Synergy WD

Detergente tri-enzimatico per un sofisticato riprocessamento automatico degli strumenti



Aniosyme Synergy WD
5 L tanica
Codice d'ordine: 3104720

FORTE

Efficacia provata a partire da 5 minuti unita ad un'eccellente compatibilità dei materiali.

ENZIMATICO

Rimuove tutti i tipi di sporco con un sistema di dosaggio flessibile grazie alla sua formula tri-enzimatica senza silicati specificatamente sviluppata.

EFFICACE

L'efficacia della concentrazione più bassa è stata dimostrata dallo 0,2% allo 0,5% e fornisce eccellenti prestazioni di pulizia.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

- | | | |
|--|------|---------------------|
| • Densità | 20°C | 1,16 g / ml |
| • Valore pH* (concentrato) | 20°C | 8,5 |
| • Range pH* (soluzione, 2 - 5 ml/l) | 20°C | 9,6 - 10,3 |
| • Conduttività (soluzione, 2 - 5 ml/l in acqua DI) | 20°C | 0,30 - 0,64 mS / cm |

* Misurazioni del valore di pH in condizioni operative sempre per mezzo di pH metro con compensazione della temperatura.

INFORMAZIONI D'ORDINE

PRODOTTO	UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO	CODICE D'ORDINE
Aniosyme Synergy WD	2 x 5 L tanica	AN2387015



CE LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuito da:
NUOVA FARMAC SRL
Via W. Flemming, 7
37026 Settimo di Pescantina
Verona
Italy

ECOLAB

www.ecolab.com

LABORATOIRES
ANIOS
An Ecolab Company

www.anios.com

AREA DI APPLICAZIONE

Detergente tri-enzimatico per la strumentazione. Pulizia di attrezzature chirurgiche e mediche, dispositivi medici in apparecchiature di lavaggio automatico e tunnel di lavaggio.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Soluzione concentrata ad uso professionale
- Utilizzare in apparecchiature per il lavaggio automatico e nel tunnel di lavaggio a diluizioni comprese tra lo 0,2 e lo 0,5%
- Efficace a partire da 5 minuti
- Adattare la concentrazione, il tempo di contatto e la temperatura dell'acqua di diluizione in base al grado di sporco e al metodo di pulizia utilizzato
- Temperatura massima: 60°C

INGREDIENTI

Tensioattivi non ionici e cationici con effetto antischiuma, agenti sequestranti, complesso enzimatico (proteasi, lipasi e amilasi), eccipienti.

STOCCAGGIO


Pericoloso- rispettare le precauzioni per l'utilizzo (Redatto secondo le norme europee vigenti in materia di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici). Conservazione: tra +5°C e +25°C.

CERTIFICATI

Su richiesta saremo lieti di fornire i certificati.

USO SICURO DEL DISPOSITIVO MEDICO

Leggere le informazioni e l'etichetta del prodotto.

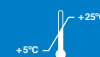

SOLO PER USO PROFESSIONALE